



# СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО

CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

[www.tppko.ru](http://www.tppko.ru), e-mail: [ktp@kmtn.ru](mailto:ktp@kmtn.ru)

**Экспертная организация: Союз «Торгово-промышленная палата Костромской области», действующая на основании закона о Торгово-промышленных палатах РФ № 5340-1 от 07.07.1993 г., гл.III. ст.12.**

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА №12905/00028

**1. Дата составления:** 18-23 января 2019 года.

**2. Место составления:** г. Кострома

**3. Заключение составлено:** экспертом Союза «Торгово - промышленная палата Костромской области» Ворониной А.С. Образование – высшее, специальность – товаровед-эксперт, сертификат компетентности эксперта №18129 от 20.10.2017 г., стаж работы экспертом – 15 лет.

**4. Наряд №28** от 18.01.2019 г.

**5. Основание для проведения экспертизы:** заявка Костромской областной общественной организации поддержки производителей лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники от 17.01.2019 г.

**6. На разрешение экспертизы поставлены вопросы:**

**6.1.** Соответствует ли состав аптечки указаниям Приказа Минздравсоцразвития России от 05 марта 2011 г. №196н «Об утверждении требований и комплектации изделий медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам?»

**6.2.** Соответствуют ли медицинские изделия (размер, форма, качество, состав), которыми укомплектована аптечка, параметрам, заявленным производителями и отвечающим требованиям вышеуказанного приказа?

**6.3.** Если нет, то по каким признакам?

**7. Изготовитель:** Научно-производственная фирма «Мирал», 394036, г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 34-33, Россия.

**8. Экспертизой установлено:**

8.1. Предъявлена аптечка для оказания первой помощи работникам, производитель ООО НПФ «МИРАЛ», согласно маркировке: изготовлена в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ №169Н от 05.03.2011 г., ТУ 9398-012-26/528997-2011, регистрационное удостоверение № ФСР 2011/11912 от 25.08.16 г.

Аптечка упакована в черный пластиковый футляр с двумя замками желтого цвета и в п/э пленку. На лицевой стороне футляра бумажная этикетка с маркировкой:

- изображение товарного знака, штрих-кода;
- наименование продукции: «Аптечка для оказания первой помощи работникам»
- надпись «Аптечка изготовлена в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ №169Н от 05.03.2011 г.
- Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008).

На тыльной стороне имеется бумажный вкладыш с маркировкой:

- состав аптечки для оказания первой помощи работникам;
- наименование НТД: ТУ и регистрационное удостоверение;
- наименование и адрес изготовителя, адрес производства;
- телефон, сайт изготовителя;
- срок годности;
- дата выпуска;
- штамп ОТК.

Экспертом произведено вскрытие упаковки и осмотр составляющих компонентов аптечки.

Для ответа на поставленные вопросы экспертом произведено исследование содержимого представленной на экспертизу аптечки на соответствие требованиям, изложенным в приказе Минздравсоцразвития РФ №169Н от 05.03.2011 г. Результаты исследования представлены в таблице №1.





# СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО

CCI of Kostroma Region, CCI KR



ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

[www.tppko.ru](http://www.tppko.ru), e-mail: [ktp@kmtn.ru](mailto:ktp@kmtn.ru)

Таблица №1

Требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптек для оказания первой помощи работникам (приказ Минздравсоцразвития РФ №169Н от 05.03.2011 г.					Фактически обнаружено:
N п/п	Наименование вложения	Нормативный документ	Форма выпуска (размеры)	Количество (штук, упаковок)	
1	Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран				
1.1	Жгут кровоостанавливающий	ГОСТ Р ИСО 10993-99 <1>		1 шт.	<p>Жгут кровоостанавливающий с дозированной компрессией ТУ 2545-008-26528997-10, изготовитель – ООО НПФ «МИРАЛ», г. Воронеж, Россия. Рег. удостоверение № ФСР 2010//07432 от 25.08.2016 г.</p> 
1.2	Бинт марлевый медицинский нестерильный	ГОСТ 1172-93 <2>	5 м x 5 см	1 шт.	<p>Бинт марлевый медицинский нестерильный ГОСТ 1172-93, согласно маркировке, размером 5 м x 5 см. Производитель: ООО «Вега», г. Воронеж, Россия. Рег. удостоверение №ФСР 2011/10001 от 11.02.2011. Согласно ГОСТ 1172-93 п. 1.1.3, размер изделия должен соответствовать размерам: длина 5,0±0,2 м, ширина 5,0±0,5 см. Фактически размер бинта составил: 4,0 м x 5 см. <b>Не соответствует требованиям ГОСТ 1172-93</b></p> 





# СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО



CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62. tel/fax (4942) 35-06-31

[www.tppko.ru](http://www.tppko.ru), e-mail: [ktp@kmtn.ru](mailto:ktp@kmtn.ru)

1.3	Бинт марлевый медицинский нестерильный	ГОСТ 1172-93	5 м x 10 см	1 шт.	<p>Бинт марлевый медицинский нестерильный, согласно маркировке, размер 5 м x 10 см ГОСТ 1172-93. Производитель: ООО «Вега», г. Воронеж, Россия. Рег. удостоверение №ФСР 2011/10001 от 11.02.2011</p> <p>Согласно ГОСТ 1172-93 п. 1.1.3, размер изделия должен соответствовать размерам: длина 5,0±0,2 м, ширина 10,0±0,5 см</p> <p>Фактически размер бинта составил: 3,98 м x 10 см</p> <p><b>Не соответствует требованиям ГОСТ 1172-93</b></p> 
1.4	Бинт марлевый медицинский нестерильный	ГОСТ 1172-93	7 м x 14 см	1 шт.	<p>Бинт марлевый медицинский нестерильный, согласно маркировке, размер 7 м x 14 см, ГОСТ 1172-93. Производитель: ООО «Вега», г. Воронеж, Россия. Рег. удостоверение №ФСР 2011/10001 от 08.09.2016</p> <p>Согласно ГОСТ 1172-93 п. 1.1.3, размер изделия должен соответствовать размерам: длина 7,0±0,3 м, ширина 14,0±0,5 см</p> <p>Фактический размер бинта составил: 6,04 м x 14 см.</p> <p><b>Не соответствует требованиям ГОСТ 1172-93</b></p> 





# СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО



CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

[www.tppko.ru](http://www.tppko.ru), e-mail: [ktpp@kmtn.ru](mailto:ktpp@kmtn.ru)

1.5	Бинт марлевый медицинский стерильный	ГОСТ 1172-93	5 м x 7 см	1 шт.	<p>Бинт марлевый медицинский стерильный, согласно маркировке, размер 5 м x 7 см ГОСТ 1172-93. Производитель: ООО «Вега», г. Воронеж, Россия. Рег. удостоверение №ФСР 2011/10001 от 11.02.2011</p> <p>Согласно ГОСТ 1172-93 п. 1.1.3, размер изделия должен соответствовать размерам: длина 5,0±0,2 м, ширина 7,0±0,5 см</p> <p>Фактический размер бинта составил: 3,7 м. x 7 см.</p> <p><b>Не соответствует требованиям ГОСТ 1172-93</b></p> 
1.6	Бинт марлевый медицинский стерильный	ГОСТ 1172-93	5 м x 10 см	2 шт.	<p>Бинт марлевый медицинский стерильный, согласно маркировке, размер 5 м x 10 см, ГОСТ 1172-93. Производитель: ООО «Вега», г. Воронеж, Россия. Рег. удостоверение №ФСР 2011/10001 от 11.02.2011</p> <p>Согласно ГОСТ 1172-93 п. 1.1.3, размер изделия должен соответствовать размерам: длина 5,0±0,2 м, ширина 10,0±0,5 см</p> <p>Фактический размер бинтов составил:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3,90 м x 10 см</li> <li>• 4,08 м x 10 см</li> </ul> <p><b>Не соответствует требованиям ГОСТ 1172-93</b></p> 





# СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»



Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО  
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

[www.tppko.ru](http://www.tppko.ru), e-mail: [ktp@kmtm.ru](mailto:ktp@kmtm.ru)

1.7	Бинт марлевый медицинский стерильный	ГОСТ 1172-93	7 м x 14 см	2 шт.	<p>Бинт марлевый медицинский стерильный, согласно маркировке, размер 7 м x 14 см, ГОСТ 1172-93. Производитель: ООО «Вега», г. Воронеж, Россия. Рег. удостоверение №ФСР 2011/10001 от 08.09.2016</p> <p>Согласно ГОСТ 1172-93 п. 1.1.3, размер изделия должен соответствовать размерам: длина 7,0±0,3 м, ширина 14,0±1 см</p> <p>Фактический размер бинтов составил:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6,00 м x 14,,0 см,</li> <li>• 6,00 м x 14,,0 см.</li> </ul> <p><b>Не соответствует требованиям ГОСТ 1172-93</b></p> 
1.8	Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой	ГОСТ 1179-93 <3>		1 шт.	<p>Пакет перевязочный медицинский первой помощи с одной подушечкой стерильный ГОСТ 1179-93. Производитель: ООО «Вега», г. Воронеж, Россия. Рег. удостоверение №ФСР 2011/10002 от 11.02.2011</p> <p>Согласно ГОСТ 1179-93, размер подушечки должен быть: 13+/-1 см x 11+/-1 см; размер бинта 5+/-0,2 м x 10+/-0,5 см.</p> <p>Фактический размер составил:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• подушечки – 9,5x10 см;</li> <li>• бинта – 3,84 м x 9,5 см</li> </ul> <p><b>Не соответствует требованиям ГОСТ 1179-93</b></p> 





# СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО  
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

[www.tppko.ru](http://www.tppko.ru), e-mail: [ktp@kmtn.ru](mailto:ktp@kmtn.ru)

1.9	Салфетки марлевые медицинские стерильные	ГОСТ 16427-93 <4>	Не менее 16 x 14 см N 10	1 уп.	<p>Салфетки марлевые медицинские стерильные, согласно маркировке - размер 16 x 14 см, ГОСТ 16427-93          Производитель: ООО «ПКФ ВераМед», Московская обл., Павлово-Посадский р-н, с. Рахманово, Россия. Рег. удостоверение №ФСР 2008/03225 от 15.09.2008 г.          Согласно ГОСТ 16427-93 п. 1.2.1, длина салфеток должна составлять 16±1,0 см, ширина 14±1,0 см.          Фактический размер салфеток составил: 15 x 13 см, отклонения по длине и ширине в пределах допусков.</p> 
1.10	Лейкопластырь бактерицидный	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 4 см x 10 см	2 шт.	<p>Лейкопластырь бактерицидный, согласно маркировке, размер 4 см x 10 см, ГОСТ Р 53498-2009. Производитель: Цзянсу Нанфанг Медикал Ко, ЛТД. КНР. Рег. удостоверение №ФСЗ 2008/01495 от 12.04.2017          Фактический размер соответствует заявленному.</p> 





# СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

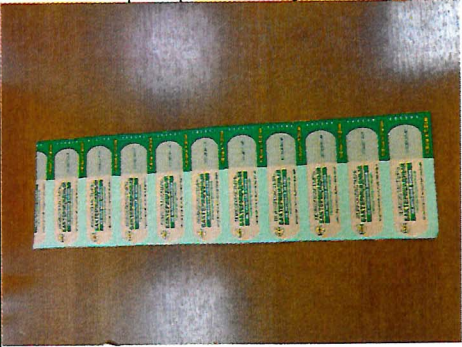


UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО  
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24  
Тел/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

[www.tppko.ru](http://www.tppko.ru), e-mail: [ktp@kmtn.ru](mailto:ktp@kmtn.ru)

1.11	Лейкопластырь бактерицидный	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 1,9 см х 7,2 см	10 шт.	Лейкопластырь бактерицидный, согласно маркировке, размер 1,9 см х 7,2 см, ГОСТ Р 53498-2009, 10 шт. Производитель: Цзянсу Нанфанг Медикал Ко, ЛТД. КНР. Рег. удостоверение №ФСЗ 2008/01495 от 12.04.2017 Фактический размер соответствует заявленному. 
1.12	Лейкопластырь рулонный	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 1 см х 250 см	1 шт.	Лейкопластырь рулонный, согласно маркировке, размер 1 см х 250 см ГОСТ не указан. Производитель: Чангжоу Хуалиань Хэлс, КНР. Рег. удостоверение ФСЗ 2008/02807 от 20.10.2008 г. Фактический размер соответствует заявленному. 
2	Средства для сердечно-легочной реанимации				
2.1	Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот - Рот" или карманная маска для искусственной вентиляции легких «Рот-маска»	ГОСТ Р ИСО 10993-99		1 шт.	Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот - Рот" Устройство - Рот" ТУ 9444-009-26528997-10. Производитель: ООО НПФ «МИРАЛ», г. Воронеж, Россия. Рег. удостоверение №ФСР 2010/07434 от 25.08.2016 г. 





# СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»


Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО  
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

[www.tppko.ru](http://www.tppko.ru), e-mail: [ktpp@kmtn.ru](mailto:ktpp@kmtn.ru)

3		Прочие средства			
3.1	Ножницы для разрезания повязок по Листеру	ГОСТ Р 51239-93 (ИСО 7741-86) <5>		1 шт.	<p>Ножницы (для разрезания повязок по Листеру), производитель: «Саммар Интернешнл», Пакистан. ГОСТ не указан. Рег. удостоверение № ФСЗ 2012/12515 В регистрационном удостоверении на аптечку изделия данного производителя не включены, соответственно не могут быть использованы для комплектации аптечки.</p> 
3.2	Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 12,5 х 11,0 см	5 шт.	<p>Салфетка антисептическая спиртовая 110 х 125 мм (70% этиловый спирт), 5 шт. ТУ 9393-001-51276525-00. Производитель: ООО «М.К. Асептика», г. Москва, Россия. Рег. удостоверение №ФСР 2009/05438 от 26.07.2016 г. Фактический размер составил: 11 х 12,5 см, соответствует заявленному.</p> 







# СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»



UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО  
CCI of Kostroma Region. CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24  
Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

[www.tppko.ru](http://www.tppko.ru), e-mail: [ktp@kmtn.ru](mailto:ktp@kmtn.ru)

3.3	Перчатки медицинские нестерильные, смотровые	ГОСТ Р ИСО 10993-99 ГОСТ Р 52238-2004 <6> ГОСТ Р 52239-2004 <7> ГОСТ 3-88 <8>	Размер не менее М	2 пары	<p>Перчатки медицинские 2 пары, размер М, ГОСТ Р ИСО 10993-2009, ГОСТ Р 25770-2007, ГОСТ Р 52239-2004, ГОСТ 3-88. Производитель: «SFM Hospital Products GmbH», Германия. Произведены линейные замеры перчаток, изделия соответствуют размеру, заявленному на маркировке (М).</p> 
3.4.	Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала с резинками или с завязками	ГОСТ Р ИСО 10993-99		2 шт.	<p>Маска медицинская нестерильная – 2 шт. ГОСТ Р ИСО 10993-99. Производитель: «ЛЕЙКО», г. Тверь, Россия. Рег. удостоверение № ФСР 2010/107707 от 11.05.2010 г.</p> 





# СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО  
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24  
Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

[www.tppko.ru](http://www.tppko.ru), e-mail: [ktp@kmtn.ru](mailto:ktp@kmtn.ru)

3.5.	Покрывало спасательное изотермическое	ГОСТ Р ИСО 10993-99, ГОСТ Р 50444-92	Не менее 160x210	1 шт.	Покрывало спасательное изотермическое (160 см – 210 см), производитель ООО НПФ «МИРАЛ», г. Воронеж, Россия, ТУ 9398-014-26528997-2011. Рег. удостоверение № ФСР 2011/11915 от 15.08.2016 г. Фактический размер соответствует заявленному.	
4. Прочие средства						
4.1.	Английские булавки стальные со спиралью	ГОСТ 9389-75 <9>	Не менее 38 мм	3 шт.		
4.2.	Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи работникам			1 шт.		
4.3.	Футляр или сумка санитарная			1 шт.		
4.4.	Блокнот отрывной для записей	ГОСТ 18510-87	Формат не менее А7	1 шт.		
4.5.	Авторучка	ГОСТ 28937-91 <11>		1 шт.		

8.2. В результате исследования установлено: состав аптечки для оказания первой помощи работникам не соответствует указаниям Приказа Минздравсоцразвития России от 05 марта 2011 г. №196н «Об утверждении требований и комплектации изделий медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам» по следующим показателям:

п.п. 1.2- 1.8 вкл. таблицы: несоответствие по фактическим размерам изделий;

п.п. 1.10, 1.11 – на маркировке указан ГОСТ 23498-2009; в указаниях приказа – ГОСТ Р ИСО 10993-99

п. 1.12– на маркировке отсутствует информация о НТД, в указаниях приказа - ГОСТ Р ИСО 10993-99;

п. 3.1 – на маркировке отсутствует информация о НТД, в указаниях приказа ГОСТ Р 51268-99. Регистрационным удостоверением на аптечку (№ ФСР 2011/11912 от 25.08.2016 г.) комплектация аптечки изделиями данного производителя не предусмотрена.





# СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО  
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

[www.tppko.ru](http://www.tppko.ru), e-mail: [ktpp@kmtn.ru](mailto:ktpp@kmtn.ru)

8.3. В медицинских изделиях (п.п. 1.2 - 1.8 вкл. Таблицы 1), которыми укомплектована аптечка, выявлены несоответствия параметрам, заявленным производителями, а именно: несоответствие линейных размеров требуемым параметрам (см. таблицу).

Оценка качества изделий по показателям, требующим лабораторных испытаний, не проводилась.

## 9. Заключение.

9.1. Состав аптечки для оказания первой помощи работникам не соответствует указаниям Приказа Минздравсоцразвития России от 05 марта 2011 г. №196н «Об утверждении требований и комплектации изделий медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам».

9.2. Часть медицинских изделий, которыми укомплектована аптечка, не соответствуют параметрам, заявленным производителями и отвечающим требованиям Приказа Минздравсоцразвития России от 05 марта 2011 г. №196н «Об утверждении требований и комплектации изделий медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам», а именно:

п.п. 1.2- 1.8 вкл. таблицы: несоответствие по фактическим размерам изделий;

п.п. 1.10, 1.11 – на маркировке указан ГОСТ 23498-2009; в указаниях приказа – ГОСТ Р ИСО 10993-99

п. 1.12– на маркировке отсутствует информация о НТД, в указаниях приказа - ГОСТ Р ИСО 10993-99;

п. 3.1 – на маркировке отсутствует информация о НТД, в указаниях приказа ГОСТ Р 51268-99. Регистрационным удостоверением на аптечку (№ ФСР 2011/11912 от 25.08.2016 г.) комплектация аптечки изделиями данного производителя не предусмотрена.

Оценка качества изделий по показателям, требующим лабораторных испытаний, не проводилась.

### Примечание:

- Примечание:
- От эксперта не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по поводу произведённой экспертизы не иначе как по отдельному договору.
- При проведении экспертизы эксперт руководствовался следующими документами:
- СТО ТПП 20-03-10 «Порядок проведения экспертизы экспертными организациями/подразделениями Торгово-промышленных палат в Российской Федерации»;
- Приказ Минздравмедпрома РФ от 20 августа 1996 г. №325 «Об утверждении состава и рекомендаций по применению аптечки первой помощи (автомобильной)» в редакции Приказа Минздравсоцразвития России от 08.09.2009 г. №697н);
- ГОСТ Р ИСО 10993-99 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования;
- ГОСТ 1172-93 Бинты марлевые медицинские. Технические условия;
- ГОСТ 1179-93 Пакеты перевязочные медицинские. Технические условия;
- ГОСТ 16427-93 Салфетки и отрезки марлевые медицинские. Технические условия;
- ГОСТ Р 51268-99 Ножницы. Общие технические условия;
- ГОСТ Р 52239-2004. Перчатки медицинские диагностические одноразовые. Часть 1. Спецификация на перчатки из каучукового латекса или раствора (с Изменением N 1);

Измерения проводились поверенной металлической линейкой длиной 300 мм с ценой деления 1 мм (клеймо о поверке Костромского ЦСМ, сертификат о калибровке средства измерений № 1844/110 от 03.09.2018 г.), длиной 1000 мм с ценой деления 1 мм (клеймо о поверке Костромского ЦСМ, сертификат о калибровке средства измерений № 1845/110 от 03.09.2018 г.).





# СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО  
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24  
Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

[www.tppko.ru](http://www.tppko.ru), e-mail: [ktp@kmtn.ru](mailto:ktp@kmtn.ru)

- Фотосъемка производилась цифровым фотоаппаратом «SONY» модель DSC-H90.
- Приведенные в Заключение эксперта распечатки фотографий не являются 100%-ным эталоном цвета товара, представленного на экспертизу.

Эксперт ТПП КО

  
Воронина А.С.

Заключение зарегистрировано на 12-ти страницах  
в ТПП Костромской области 23.01.2019 года



Пронумеровано,  
прошнуровано и  
скреплено печатью  
12 лист 08  
Орлов  
Президент ТПЛ КО  
Орлов В.В.

