



СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 102440004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: ktp@kmtn.ru

Экспертная организация: Союз «Торгово-промышленная палата Костромской области», действующая на основании закона о Торгово-промышленных палатах РФ № 5340-1 от 07.07.1993 г., гл.III. ст.12.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА №12905/00097

1. Дата составления: 13 февраля 2019 года.

2. Место составления: г. Кострома

3. Заключение составлено: экспертом Союза «Торгово - промышленная палата Костромской области» Ворониной А.С. Образование – высшее, специальность – товаровед-эксперт, сертификат компетентности эксперта №18129 от 20.10.2017 г., стаж работы экспертом – 15 лет.

4. Наряд №97 от 11.02.2019 г.

5. Основание для проведения экспертизы: заявка Костромской областной общественной организации поддержки производителей лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники от 10.02.2019 г.

6. На разрешение экспертизы поставлены вопросы:

6.1. Соответствуют ли медицинские изделия – бинты, пакет перевязочный (размер, форма, качество, состав), которыми укомплектована аптечка, параметрам, заявленным производителями и отвечающим требованиям Приказа Минздравмедпрома РФ от 20 августа 1996 г. №325 «Об утверждении состава и рекомендаций по применению аптечки первой помощи (автомобильной)» в редакции Приказа Минздравсоцразвития России от 8 сентября 2009 г. №697Н (Приложение №1)?

6.2. Если нет, то по каким признакам?

7. Изготовитель: Научно-производственная фирма «Мирал», 394036, г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 34-33, Россия.

8. Экспертизой установлено:

8.1. Предъявлена аптечка первой помощи автомобильная «Мирал-Н», согласно маркировке: ТУ 21.20.24-007-26528997-2017 (взамен ТУ 9398-007-26528997-2009), регистрационное удостоверение № ФСР 2010/06652 от 06.10.17 г., изготовлена в соответствии с приказом Минздравмедпрома РФ №325 от 20.08.1996 г., в редакции приказа Минздравсоцразвития РФ №697Н от 08.09.2009 г.

Аптечка упакована в черный пластиковый футляр с двумя замками желтого цвета и в п/э пленку. На лицевой стороне футляра бумажная этикетка с маркировкой:

- изображение товарного знака, штрих-кода;
- наименование продукции: «Аптечка первой помощи автомобильная «Мирал-Н»
- регистрационное удостоверение № ФСР 2010/06652 от 06.10.17 г.
- ТУ 21.20.24-007-26528997-2017 (взамен ТУ 9398-007-26528997-2009)
- Аптечка «Мирал-Н» изготовлена в соответствии с приказом Минздравмедпрома РФ №325 от 20.08.1996 г., в редакции приказа Минздравсоцразвития РФ №697Н от 08.09.2009 г.
- Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008).

На тыльной стороне имеется бумажный вкладыш с маркировкой:

- состав аптечки первой помощи автомобильной «Мирал-Н»;
- наименование НТД;
- наименование и адрес изготовителя: ООО НПФ «Мирал», 394036, г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 34-33, Россия.
- номер лицензии и регистрационного удостоверения;
- телефон, сайт изготовителя;
- срок годности;
- дата выпуска;
- штамп ОТК.

Экспертом произведено вскрытие упаковки и осмотр составляющих компонентов аптечки.





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24
Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: ktpp@kmtn.ru

Для ответа на поставленные вопросы экспертом произведено исследование бинтов, пакета перевязочного, которыми укомплектована аптечка, на соответствие параметрам, заявленным производителями и требованиям, изложенным в приказе Минздравмедпрома РФ №325 от 20.08.1996 г., в редакции приказа Минздравсоцразвития РФ №697Н от 08.09.2009 г. (Приложение N 1).

Результаты исследования представлены в таблице №1.

Требования к медицинским изделиям в составе аптечки первой помощи в соответствии с приказом Минздравмедпрома РФ №325 от 20.08.1996 г., в редакции приказа Минздравсоцразвития РФ №697Н от 08.09.2009 г.					Фактически обнаружено:
N п/п	Наименование вложения	Нормативный документ	Форма выпуска (размеры)	Количество (штук, упаковок)	
1	Бинт марлевый медицинский нестерильный	ГОСТ 1172-93	5 м x 5 см	2 шт.	<p>Бинт марлевый медицинский нестерильный ГОСТ 1172-93, согласно маркировке, размером 5 м x 5 см. Производитель: ООО «Вега», 394026, г. Воронеж, Проспект Труда, д. 46И, Россия. Рег. удостоверение № ФСР 2011/10001 от 08.09.2016 г.</p> <p>Согласно ГОСТ 1172-93 п. 1.1.3, размер изделия должен соответствовать размерам: длина 5,0±0,2 м, ширина 5,0±0,5 см</p> <p>Фактически размер бинтов составил:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,5 м x 4 см • 2,69 м x 5 см <p>Не соответствует заявленным параметрам и требованиям ГОСТ 1172-93</p>





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО

CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: ktp@kmtn.ru

2	Бинт марлевый медицинский нестерильный	ГОСТ 1172-93	5 м x 10 см	2 шт.	<p>Бинт марлевый медицинский нестерильный, согласно маркировке, размер 5 м x 10 см ГОСТ 1172-93. Производитель: ООО «Вега», 394026, г. Воронеж, Проспект Труда, д. 46И, Россия. Рег. удостоверение № ФСР 2011/10001 от 08.09.2016 г. Согласно ГОСТ 1172-93 п. 1.1.3, размер изделия должен соответствовать размерам: длина 5,0±0,2 м, ширина 10,0±0,5 см Фактически размер бинтов составил:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3,25 м x 10 см • 2,75 м x 10 см <p>Не соответствует заявленным параметрам и требованиям ГОСТ 1172-93</p> 
3	Бинт марлевый медицинский нестерильный	ГОСТ 1172-93	7 м x 14 см	1 шт.	<p>Бинт марлевый медицинский нестерильный, согласно маркировке, размер 7 м x 14 см, ГОСТ 1172-93. Производитель: ООО «Вега», 394026, г. Воронеж, Проспект Труда, д. 46И, Россия. Рег. удостоверение № ФСР 2011/10001 от 08.09.2016 г. Согласно ГОСТ 1172-93 п. 1.1.3, размер изделия должен соответствовать размерам: длина 7,0±0,3 м, ширина 14,0±0,5 см Фактический размер бинта составил:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,75 м x 14 см <p>Не соответствует заявленным параметрам и требованиям ГОСТ 1172-93</p> 





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993
Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24
Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31
www.tppko.ru, e-mail: ktp@kmtn.ru

4	Бинт марлевый медицинский стерильный	ГОСТ 1172-93	5 м x 7 см	2 шт.	<p>Бинт марлевый медицинский стерильный, согласно маркировке, размер 5 м x 7 см ГОСТ 1172-93. Производитель: ООО «Вега», 394026, г. Воронеж, Проспект Труда, д. 46И, Россия. Рег. удостоверение № ФСР 2011/10001 от 08.09.2016 г.</p> <p>Согласно ГОСТ 1172-93 п. 1.1.3, размер изделия должен соответствовать размерам: длина 5,0±0,2 м, ширина 7,0±0,5 см</p> <p>Фактический размер бинтов составил:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,74 м x 7 см; • 2,70 м x 7 см <p>Не соответствует заявленным параметрам и требованиям ГОСТ 1172-93</p>
5	Бинт марлевый медицинский стерильный	ГОСТ 1172-93	5 м x 10 см	2 шт.	<p>Бинт марлевый медицинский стерильный, согласно маркировке, размер 5 м x 10 см, ГОСТ 1172-93. Производитель: ООО «Вега», 394026, г. Воронеж, Проспект Труда, д. 46И, Россия. Рег. удостоверение № ФСР 2011/10001 от 08.09.2016 г.</p> <p>Согласно ГОСТ 1172-93 п. 1.1.3, размер изделия должен соответствовать размерам: длина 5,0±0,2 м, ширина 10,0±0,5 см</p> <p>Фактический размер бинтов составил:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,81 м x 9,5 см • 2,63 м x 10 см <p>Не соответствует заявленным параметрам и требованиям ГОСТ 1172-93</p>







СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993
Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24
Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31
www.tppko.ru, e-mail: ktp@kmtn.ru

6	Бинт марлевый медицинский стерильный	ГОСТ 1172-93	7 м x 14 см	1 шт.	<p>Бинт марлевый медицинский стерильный, согласно маркировке, размер 7 м x 14 см, ГОСТ 1172-93. Производитель: ООО «Вега», 394026, г. Воронеж, Проспект Труда, д. 46И, Россия. Рег. удостоверение № ФСР 2011/10001 от 08.09.2016 г. Согласно ГОСТ 1172-93 п. 1.1.3, размер изделия должен соответствовать размерам: длина 7,0±0,3 м, ширина 14,0±1 см. Фактический размер бинта составил:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,63 м x 13,5 см <p>Не соответствует заявленным параметрам и требованиям ГОСТ 1172-93</p> 
7	Пакет перевязочный стерильный	ГОСТ 1179-93		1 шт.	<p>Пакет перевязочный стерильный ГОСТ 1179-93. Производитель: ООО «Вега», г. Воронеж, Россия. Рег. удостоверение № ФСР 2011/10002 от 08.09.2016 г. Согласно ГОСТ 1179-93, размер подушечки должен быть: 13+/-1 см x 11+/-1 см; размер бинта 5+/-0,2 м x 10+/-0,5 см. Фактический размер составил:</p> <ul style="list-style-type: none"> • подушечки – 9,5x10 см; • бинта – 2,68 м x 10 см <p>Не соответствует требованиям ГОСТ 1179-93</p> 





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24
Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: ktpp@kmtn.ru



8.2. В результате исследования установлено: бинты, пакет перевязочный, которыми укомплектована аптечка, **не соответствуют** параметрам, заявленным производителями и отвечающим требованиям Приказа Минздравмедпрома РФ от 20 августа 1996 г. №325 «Об утверждении состава и рекомендаций по применению аптечки первой помощи (автомобильной)» в редакции Приказа Минздравсоцразвития России от 8 сентября 2009 г. №697н (Приложение №1) **по линейным размерам.**

Оценка качества изделий по показателям, требующим лабораторных испытаний, не проводилась.

9. Заключение.

Бинты, пакет перевязочный, которыми укомплектована аптечка, **не соответствуют** параметрам, заявленным производителями и отвечающим требованиям Приказа Минздравмедпрома РФ от 20 августа 1996 г. №325 «Об утверждении состава и рекомендаций по применению аптечки первой помощи (автомобильной)» в редакции Приказа Минздравсоцразвития России от 8 сентября 2009 г. №697н (Приложение №1) **по линейным размерам.**

Оценка качества изделий по показателям, требующим лабораторных испытаний, не проводилась.

Примечание:

- От эксперта не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по поводу произведённой экспертизы не иначе как по отдельному договору.

При проведении экспертизы эксперт руководствовался следующими документами:





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24
Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: ktp@kmtn.ru

- СТО ТПП 20-03-10 «Порядок проведения экспертизы экспертными организациями/подразделениями Торгово-промышленных палат в Российской Федерации»;
- Приказ Минздравмедпрома РФ от 20 августа 1996 г. №325 «Об утверждении состава и рекомендаций по применению аптечки первой помощи (автомобильной)» в редакции Приказа Минздравсоцразвития России от 08.09.2009 г. №697н);
- ГОСТ 1172-93 Бинты марлевые медицинские. Технические условия;
- ГОСТ 1179-93 Пакеты перевязочные медицинские. Технические условия;
- Измерения проводились поверенной металлической линейкой длиной 300 мм с ценой деления 1 мм (клеймо о поверке Костромского ЦСМ, сертификат о калибровке средства измерений № 1844/110 от 03.09.2018 г.), длиной 1000 мм с ценой деления 1 мм (клеймо о поверке Костромского ЦСМ, сертификат о калибровке средства измерений № 1845/110 от 03.09.2018 г.) .
- Фотосъемка производилась цифровым фотоаппаратом «SONY» модель DSC-H90.
- Приведенные в Заключении эксперта распечатки фотографий не являются 100%-ным эталоном цвета товара, представленного на экспертизу.

Эксперт ТПП КО



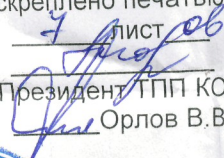
Воронина А.С.

Заключение зарегистрировано на 7-ми страницах
в ТПП Костромской области 13.02.2019 года



Пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью

4 лист


Президент ТПП КО
Орлов В.В.

