



СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО

CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: ktpp@kmtn.ru

Экспертная организация: Союз «Торгово-промышленная палата Костромской области», действующая на основании закона о Торгово-промышленных палатах РФ № 5340-1 от 07.07.1993 г., гл.III. ст.12.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА №12905/00044

1. Дата составления: 31 января 2019 года.

2. Место составления: г. Кострома

3. Заключение составлено: экспертом Союза «Торгово - промышленная палата Костромской области» Ворониной А.С. Образование – высшее, специальность – товаровед-эксперт, сертификат компетентности эксперта №18129 от 20.10.2017 г., стаж работы экспертом – 15 лет.

4. Наряд №44 от 25.01.2019 г.

5. Основание для проведения экспертизы: заявка Костромской областной общественной организации поддержки производителей лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники от 25.01.2019 г.

6. На разрешение экспертизы поставлены вопросы:

6.1. Соответствует ли состав аптечки указаниям Приказа Минздравмедпрома РФ от 20 августа 1996 г. №325 «Об утверждении состава и рекомендаций по применению аптечки первой помощи (автомобильной)» в редакции Приказа Минздравсоцразвития России от 08.09.2009 г. №697н (Приложение №1)?

6.2. Соответствуют ли медицинские изделия (размер, форма, состав), которыми укомплектована аптечка, параметрам, заявленным производителями и отвечающим требованиям вышеуказанного приказа и разрешительным документам, если нет, то по каким признакам?

7. Изготовитель: Научно-производственная фирма «Мирал», 394036, г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 34-33, Россия.

8. Экспертизой установлено:

8.1. Предъявлена аптечка первой помощи автомобильная «REXXON», согласно маркировке: ТУ 21.20.24-007-26528997-2017, регистрационное удостоверение № ФСР 2010/06652 от 06.10.2017 г., изготовлена в соответствии с приказом Минздравмедпрома РФ №325 от 20.08.1996 г., в редакции приказа Минздравсоцразвития РФ №697Н от 08.09.2009 г.

Аптечка упакована в черный пластиковый футляр с двумя замками оранжевого цвета и в п/э пленку. На лицевой стороне футляра бумажная этикетка с маркировкой:

- наименование продукции: «Автомобильная аптечка первой помощи «REXXON/ Superior Quality»,

На тыльной стороне футляра бумажная этикетка с маркировкой:

- штрих-код;
- состав аптечки первой помощи автомобильной;
- наименование НТД;
- наименование и адрес изготовителя;
- email, сайт изготовителя (Научно-производственная фирма «Мирал»);
- срок годности;
- дата изготовления (02.2018 г);
- знак добровольной сертификации.

Экспертом произведено вскрытие упаковки и осмотр составляющих компонентов аптечки.

Для ответа на поставленные вопросы экспертом произведено исследование содержимого представленной на экспертизу аптечки на соответствие требованиям, изложенным в приказе Минздравмедпрома РФ №325 от 20.08.1996 г., в редакции приказа Минздравсоцразвития РФ №697Н от 08.09.2009 г. (Приложение N 1). Результаты исследования представлены в таблице №1.





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО



CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: ktp@kmtn.ru

СОСТАВ АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ (АВТОМОБИЛЬНОЙ) в соответствии с приказом Минздравмедпрома РФ №325 от 20.08.1996 г., в редакции приказа Минздравсоцразвития РФ №697Н от 08.09.2009 г.					Фактически обнаружено:
№ п/п	Наименование вложения	Нормативный документ	Форма выпуска (размеры)	Количество (штук, упаковок)	
1	Средства для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран				
1.1	Жгут кровоостанавливающий	ГОСТ Р ИСО 10993-99		1 шт.	<p>Жгут кровоостанавливающий с дозированной компрессией ТУ 2545-008-26528997-10, производитель: ООО НПФ «Мирал», г. Воронеж, Россия. Рег. удостоверение № ФСР 2010/07432 от 25.08.2016 г.</p> 
1.2	Бинт марлевый медицинский нестерильный	ГОСТ 1172-93	5 м x 5 см	2 шт.	<p>Бинт марлевый медицинский нестерильный ГОСТ 1172-93, согласно маркировке, размером 5 м x 5 см. Производитель: ООО «Вега», г. Воронеж, Россия. Рег. удостоверение № ФСР 2011/10001 от 08.09.2016 г. Согласно ГОСТ 1172-93 п. 1.1.3, размер изделия должен соответствовать размерам: длина 5,0±0,2 м, ширина 5,0±0,5 см</p> <p>Фактически размер бинтов составил:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,6 м x 5 см • 2,65 м x 5 см <p>Не соответствует требованиям ГОСТ 1172-93</p> 





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО

CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: tpp@kmtn.ru

1.3	Бинт марлевый медицинский нестерильный	ГОСТ 1172-93	5 м x 10 см	2 шт.	<p>Бинт марлевый медицинский нестерильный, согласно маркировке, размер 5 м x 10 см ГОСТ 1172-93. Производитель: ООО «Вега», г. Воронеж, Россия. Рег. удостоверение № ФСР 2011/10001 от 08.09.2016 г. Согласно ГОСТ 1172-93 п. 1.1.3, размер изделия должен соответствовать размерам: длина 5,0±0,2 м, ширина 10,0±0,5 см</p> <p>Фактически размер бинтов составил:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,90 м x 10 см • 2,92 м x 10 см <p>Не соответствует требованиям ГОСТ 1172-93</p> 
1.4	Бинт марлевый медицинский нестерильный	ГОСТ 1172-93	7 м x 14 см	1 шт.	<p>Бинт марлевый медицинский нестерильный, согласно маркировке, размер 7 м x 14 см, ГОСТ 1172-93. Производитель: ООО «Вега», г. Воронеж, Россия. Рег. удостоверение № ФСР 2011/10001 от 08.09.2016 г. Согласно ГОСТ 1172-93 п. 1.1.3, размер изделия должен соответствовать размерам: длина 7,0±0,3 м, ширина 14,0±0,5 см</p> <p>Фактический размер бинта составил:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,77 м x 14 см. <p>Не соответствует требованиям ГОСТ 1172-93</p> 





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО



CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: ktpp@kmtn.ru

1.5	Бинт марлевый медицинский стерильный	ГОСТ 1172-93	5 м x 7 см	2 шт.	<p>Бинт марлевый медицинский стерильный, согласно маркировке, размер 5 м x 7 см ГОСТ 1172-93. Производитель: ООО «Вега», г. Воронеж, Россия. Рег. удостоверение № ФСР 2011/10001 от 08.09.2016 г. Согласно ГОСТ 1172-93 п. 1.1.3, размер изделия должен соответствовать размерам: длина 5,0±0,2 м, ширина 7,0±0,5 см</p> <p>Фактический размер бинтов составил:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,70 м x 7 см; • 2,78 м x 7 см <p>Не соответствует требованиям ГОСТ 1172-93</p> 
1.6	Бинт марлевый медицинский стерильный	ГОСТ 1172-93	5 м x 10 см	2 шт.	<p>Бинт марлевый медицинский стерильный, согласно маркировке, размер 5 м x 10 см, ГОСТ 1172-93. Производитель: ООО «Вега», г. Воронеж, Россия. Рег. удостоверение № ФСР 2011/10001 от 08.09.2016 г. Согласно ГОСТ 1172-93 п. 1.1.3, размер изделия должен соответствовать размерам: длина 5,0±0,2 м, ширина 10,0±0,5 см</p> <p>Фактический размер бинтов составил:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,68 м x 10 см • 2,74 м x 10 см <p>Не соответствует требованиям ГОСТ 1172-93</p> 





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО



CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001. ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: ktpp@kmtn.ru

1.7	Бинт марлевый медицинский стерильный	ГОСТ 1172-93	7 м x 14 см	1 шт.	<p>Бинт марлевый медицинский стерильный, согласно маркировке, размер 7 м x 14 см, ГОСТ 1172-93. ООО «Вега», г. Воронеж, Россия. Рег. удостоверение № ФСР 2011/10001 от 08.09.2016 г.</p> <p>Согласно ГОСТ 1172-93 п. 1.1.3, размер изделия должен соответствовать размерам: длина 7,0±0,3 м, ширина 14,0±1 см</p> <p>Фактический размер бинта составил:</p> <ul style="list-style-type: none">• 2,62 м x 14 см <p>Не соответствует требованиям ГОСТ 1172-93</p> 
1.8	Пакет перевязочный стерильный	ГОСТ 1179-93		1 шт.	<p>Пакет перевязочный стерильный ГОСТ 1179-93. Производитель: ООО «Вега», г. Воронеж, Россия. Рег. удостоверение №ФСР 2011/10002 от 08.09.2016 г.</p> <p>Согласно ГОСТ 1179-93, размер подушечки должен быть: 13+/-1 см x 11+/-1 см; размер бинта 5+/-0,2 м x 10+/-0,5 см.</p> <p>Фактический размер составил:</p> <ul style="list-style-type: none">• подушечки – 10x10 см;• бинта – 2,74 м x 11 см <p>Не соответствует требованиям ГОСТ 1179-93</p> 





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО

CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: tpp@kmtn.ru

1.9	Салфетки марлевые медицинские стерильные	ГОСТ 16427-93	Не менее 16 x 14 см N 10	1 уп.	<p>Салфетки марлевые медицинские стерильные, согласно маркировке - размер 16 x 14 см, ГОСТ 16427-93. Производитель: ООО «ПКФ ВераМед», Московская обл., Павлово-Посадский р-н, Россия. Согласно ГОСТ 16427-93 п. 1.2.1, длина салфеток должна составлять 16±1,0 см, ширина 14±1,0 см. Фактический размер салфеток составил: 15 x 14 см, отклонения по длине и ширине в пределах допусков.</p> 
1.10	Лейкопластырь бактерицидный	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 4 см x 10 см	2 шт.	<p>Лейкопластырь бактерицидный, согласно маркировке, размер 4 см x 10 см, ГОСТ Р 53498-2009. Производитель: Цзянсу Нанфанг Медикал Ко, ЛТД. КНР. Рег. удостоверение №ФСЗ 2008/01495 от 12.04.2017. Фактический размер соответствует заявленному.</p> 





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО


CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: tppp@kmtn.ru

1.11	Лейкопластырь бактерицидный	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 1,9 см х 7,2 см	10 шт.	Лейкопластырь бактерицидный, согласно маркировке, размер 1,9 см х 7,2 см, ГОСТ Р 53498-2009, 10 шт. Производитель: Цзянсу Нанфанг Медикал Ко, ЛТД. КНР. Рег. удостоверение №ФСЗ 2008/01495 от 12.04.2017. Фактический размер соответствует заявленному. 
1.12	Лейкопластырь рулонный	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 1 см х 250 см	1 шт.	Лейкопластырь рулонный, согласно маркировке, размер 1 см х 250 см ГОСТ не указан. Производитель: Чангжоу Хуалиань Хэлс, КНР. Рег. удостоверение ФСЗ 2008/02807 от 20.10.2008 г. Фактический размер соответствует заявленному. 
2	Средства для сердечно-легочной реанимации				
2.1	Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот"	ГОСТ Р ИСО 10993-99		1 шт.	Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" ТУ 9444-009-26528997-10. Производитель: ООО НПФ «МИРАЛ», г. Воронеж, Россия. Рег. удостоверение №ФСР 2010/07434 от 25.08.2016 г. 
3	Прочие средства				





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО



CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: ktp@kmtn.ru

3.1	Ножницы	ГОСТ Р 51268-99		1 шт.	<p>Ножницы тупоконечные, ГОСТ не указан. Производитель: «Lin Li Home Products Manufactory Corp» (Китай)</p> 
3.2	Перчатки медицинские	ГОСТ Р ИСО 10993-99 ГОСТ Р 52238-2004 ГОСТ Р 52239-2004 ГОСТ 3-88	Размер не менее М	1 пара	<p>Перчатки медицинские размер М, ГОСТ Р ИСО 10993-2009, ГОСТ Р 25770-2007, ГОСТ Р 52239-2004, ГОСТ 3-88. Производитель: АО «АЗРИ», г. Армавир, Россия. Рег. удостоверение № ФСР 2010/08547 от 15.08.2016 г.). Произведены линейные замеры перчаток, изделие соответствует заявленному на маркировке (М).</p> 





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО

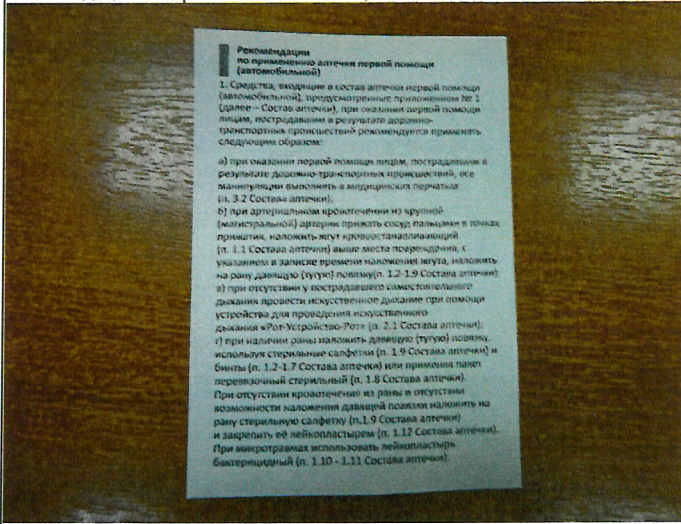

CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: ktp@kmtn.ru

3.3	Рекомендации по применению аптечки первой помощи (автомобильной)			1 шт.	<p>Рекомендации по применению аптечки первой помощи (автомобильной)</p> <p>1. Средства, входящие в состав аптечки первой помощи (автомобильной), предусмотренные приложением №1 (Состав аптечки), при оказании первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, рекомендуется применять в следующем порядке:</p> <p>а) при оказании первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, все манипуляции выполнять в медицинских перчатках (п. 2.2 Состав аптечки);</p> <p>б) при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии прижать сосуд пальцами в тонких перчатках, наложить жгут кровоостанавливающий (п. 1.1 Состав аптечки) выше места повреждения, с указанием в дальнейшем положение жгута, наложить на рану давящую (тугую) повязку (п. 1.2-1.9 Состав аптечки);</p> <p>в) при отсутствии у пострадавшего самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание при помощи устройства для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» (п. 2.1 Состав аптечки);</p> <p>г) при наличии ран наложить давящую (тугую) повязку, использовать стерильные салфетки (п. 1.9 Состав аптечки) и бинты (п. 1.2-1.7 Состав аптечки) или применить пакет перевязочный стерильный (п. 1.8 Состав аптечки);</p> <p>При отсутствии кровотечения из раны и отсутствии возможности наложения давящей повязки наложить на рану стерильную салфетку (п.1.9 Состав аптечки) и закрепить ее лейкопластырем (п. 1.12 Состав аптечки). При амниотравмах использовать лейкопластырь бактерицидный (п. 1.10 - 1.11 Состав аптечки).</p> 
3.4	Футляр			1 шт.	

8.2. В результате исследования установлено: состав аптечки первой помощи автомобильной «REXXON» не соответствует указаниям Приказа Минздравмедпрома РФ от 20 августа 1996 г. №325 «Об утверждении состава и рекомендаций по применению аптечки первой помощи (автомобильной)» в редакции Приказа Минздравсоцразвития России от 08.09.2009 г. №697н) по следующим показателям:

- п.п. 1.2-1.8 таблицы: несоответствие по фактическим размерам изделий;
- п.п. 1.10, 1.11 – на маркировке указан ГОСТ 53498-2009; в указаниях приказа – ГОСТ Р ИСО 10993-99
- п. 1.12– на маркировке отсутствует информация о НТД, в указаниях приказа - ГОСТ Р ИСО 10993-99;
- п. 3.1 – на маркировке отсутствует информация о НТД, в указаниях приказа ГОСТ Р 51268-99.

Оценка качества изделий по показателям, требующим лабораторных испытаний, не проводилась.





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО

CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: tppp@kmtn.ru

9. Заключение.

9.1. Состав аптечки первой помощи автомобильной «REXXON» не соответствует указаниям Приказа Минздравмедпрома РФ от 20 августа 1996 г. №325 «Об утверждении состава и рекомендаций по применению аптечки первой помощи (автомобильной)» в редакции Приказа Минздравсоцразвития России от 08.09.2009 г. №697н)

9.2. Медицинские изделия, входящие в состав аптечки, не соответствуют параметрам, заявленным производителями и отвечающим требованиям указаниям Приказа Минздравмедпрома РФ от 20 августа 1996 г. №325 «Об утверждении состава и рекомендаций по применению аптечки первой помощи (автомобильной)» в редакции Приказа Минздравсоцразвития России от 08.09.2009 г. №697н), а именно:

п.п. 1.2-1.8 таблицы: несоответствие по фактическим размерам изделий;

п.п. 1.10, 1.11 – на маркировке указан ГОСТ 53498-2009; в указаниях приказа – ГОСТ Р ИСО 10993-99

п. 1.12– на маркировке отсутствует информация о НТД, в указаниях приказа - ГОСТ Р ИСО 10993-99;

п. 3.1 – на маркировке отсутствует информация о НТД, в указаниях приказа ГОСТ Р 51268-99.

Примечание:

• От эксперта не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по поводу произведённой экспертизы не иначе как по отдельному договору.

При проведении экспертизы эксперт руководствовался следующими документами:

- СТО ТПП 20-03-10 «Порядок проведения экспертизы экспертными организациями/подразделениями Торгово-промышленных палат в Российской Федерации»;
- Приказ Минздравмедпрома РФ от 20 августа 1996 г. №325 «Об утверждении состава и рекомендаций по применению аптечки первой помощи (автомобильной)» в редакции Приказа Минздравсоцразвития России от 08.09.2009 г. №697н);
- ГОСТ Р ИСО 10993-99 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования;
- ГОСТ 1172-93 Бинты марлевые медицинские. Технические условия;
- ГОСТ 1179-93 Пакеты перевязочные медицинские. Технические условия;
- ГОСТ 16427-93 Салфетки и отрезки марлевые медицинские. Технические условия;
- ГОСТ Р 51268-99 Ножницы. Общие технические условия;
- ГОСТ Р 52239-2004. Перчатки медицинские диагностические одноразовые. Часть 1. Спецификация на перчатки из каучукового латекса или раствора (с Изменением N 1);
- Измерения проводились поверенной металлической линейкой длиной 300 мм с ценой деления 1 мм (клеймо о поверке Костромского ЦСМ, сертификат о калибровке средства измерений № 1844/110 от 03.09.2018 г.), длиной 1000 мм с ценой деления 1 мм (клеймо о поверке Костромского ЦСМ, сертификат о калибровке средства измерений № 1845/110 от 03.09.2018 г.) .
- Фотосъемка производилась цифровым фотоаппаратом «SONY» модель DSC-H90.
- Приведенные в Заключении эксперта распечатки фотографий не являются 100%-ным эталоном цвета товара, представленного на экспертизу.

Приложение №1 к заключению эксперта №12905/00044: фотографии в количестве 4 шт. на 2 листах.

Эксперт ТПП КО



 Воронина А.С.

Заключение зарегистрировано на 10-ти страницах
в ТПП Костромской области 31.01.2019 года.





ГОР. ЭКСП. №12905/00044
Г. КОСТРОМЫ
31.01.2019

Смирнов



Рекомендации по применению аптечки первой помощи (автомобильной)

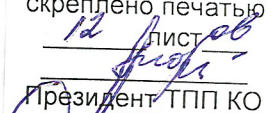
1. Средства, входящие в состав аптечки первой помощи (автомобильной), предусмотренные приложением № 1 (далее – Состав аптечки), при оказании первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий рекомендуется применять следующим образом:

- а) при оказании первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, все манипуляции выполнять в медицинских перчатках (п. 3.2 Состав аптечки);
- б) при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии прижать сосуд пальцами в точках прижатия, наложить жгут кровоостанавливающий (п. 1.1 Состав аптечки) выше места повреждения, с указанием в записке времени наложения жгута, наложить на рану давящую (тугую) повязку (п. 1.2-1.9 Состав аптечки);
- в) при отсутствии у пострадавшего самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание при помощи устройства для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» (п. 2.1 Состав аптечки);
- г) при наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя стерильные салфетки (п. 1.9 Состав аптечки) и бинты (п. 1.2-1.7 Состав аптечки) или применяя пакет перевязочный стерильный (п. 1.8 Состав аптечки). При отсутствии кровотечения из раны и отсутствии возможности наложения давящей повязки наложить на рану стерильную салфетку (п.1.9 Состав аптечки) и закрепить её лейкопластырем (п. 1.12 Состав аптечки). При микротравмах использовать лейкопластырь бактерицидный (п. 1.10 - 1.11 Состав аптечки).



Пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью

12 лист 06


Президент ТПП КО
Орлов В.В.

