



# СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО  
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

[www.tppko.ru](http://www.tppko.ru), e-mail: [ktp@kmtn.ru](mailto:ktp@kmtn.ru)

**Экспертная организация: Союз «Торгово-промышленная палата Костромской области», действующая на основании закона о Торгово-промышленных палатах РФ № 5340-1 от 07.07.1993 г., гл.III. ст.12.**

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА №12905/00063

**1. Дата составления:** 08 февраля 2019 года.

**2. Место составления:** г. Кострома

**3. Заключение составлено:** экспертом Союза «Торгово - промышленная палата Костромской области» Ворониной А.С. Образование – высшее, специальность – товаровед-эксперт, сертификат компетентности эксперта №18129 от 20.10.2017 г., стаж работы экспертом – 15 лет.

**4. Наряд №63** от 06.02.2019 г.

**5. Основание для проведения экспертизы:** заявка Костромской областной общественной организации поддержки производителей лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники от 31.01.2019 г.

**6. На разрешение экспертизы поставлены вопросы:**

**6.1.** Соответствует ли состав аптечки указаниям Приказа Минздравсоцразвития России от 05 марта 2011 г. №169н «Об утверждении требований и комплектации изделий медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам»?

**6.2.** Соответствуют ли медицинские изделия (размер, форма, качество, состав), которыми укомплектована аптечка, параметрам, заявленным производителями и отвечающим требованиям вышеуказанного приказа? Если нет, то по каким признакам?

**6.3.** Соответствуют ли производители, указанные на упаковке медицинских изделий, заявленным в регистрационном удостоверении?

**7. Изготовитель:** ООО ТД «Апполо», 111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 20, Россия.

**8. Экспертизой установлено:**

8.1. Предъявлена аптечка для оказания первой помощи работникам. Согласно маркировке, изготовлена в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ №169Н от 05.03.2011 г., ТУ 9398-047-42965160-2011, регистрационное удостоверение №ФСР 2011/11271 от 19.03.2012 г.

Аптечка упакована в оранжевый пластиковый футляр с двумя замками темно-синего цвета и в п/э пленку. На лицевой стороне футляра бумажная этикетка с маркировкой:

- изображение товарного знака «АППОЛО медицинская научно-производственная компания премиум»;
- наименование продукции: «Аптечка для оказания первой помощи работникам»;
- перечень вложений;
- перечень НТД: ТУ 9398-047-42965160-2011, рег. удостоверение №ФСР 2011/11271 от 19.03.2012 г.
- условия хранения;
- адрес производителя: ООО ТД «Апполо», 111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 20, Россия, телефон, контакты;
- знак добровольной сертификации;
- штрих-код, дата выпуска и срок годности.

Для ответа на поставленные вопросы экспертом произведено исследование содержимого представленной на экспертизу аптечки на соответствие требованиям, изложенным в приказе Минздравсоцразвития РФ №169Н от 05.03.2011 г. Результаты исследования представлены в таблице №1.







# СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО

CCI of Kostroma Region, CCI KR



ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

[www.tppko.ru](http://www.tppko.ru), e-mail: [tpp@kmtn.ru](mailto:tpp@kmtn.ru)

Таблица №1

Требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптек для оказания первой помощи работникам (приказ Минздравсоцразвития РФ №169Н от 05.03.2011 г.					Фактически обнаружено:
N п/п	Наименование вложения	Нормативный документ	Форма выпуска (размеры)	Количество (штук, упаковок)	
1	Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран				
1.1	Жгут кровоостанавливающий	ГОСТ Р ИСО 10993-99 <1>		1 шт.	<p>Жгут кровоостанавливающий с дозированной компрессией ТУ 2545-008-26528997-10, производитель: ООО НПФ «Мирал», г. Воронеж, Россия. Рег. удостоверение № ФСР 2010/07432 от 25.08.2016 г.</p> 
1.2	Бинт марлевый медицинский нестерильный	ГОСТ 1172-93 <2>	5 м x 5 см	1 шт.	<p>Бинт марлевый медицинский нестерильный ГОСТ 1172-93, согласно маркировке, размером 5 м x 5 см. Производитель: ООО ТД «АППОЛО», г. Москва. Рег. удостоверение №ФСР 2007/00081 от 10.05.2007. Согласно ГОСТ 1172-93, размер бинта должен составлять: длина 5,0±0,2 м, ширина 5,0±0,5 см. Фактически размер бинта составил:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4,86 м x 5 см</li> </ul> <p>Соответствует требованиям ГОСТ по линейным размерам: отклонения в пределах нормы.</p> 







# СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО

CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

[www.tppko.ru](http://www.tppko.ru), e-mail: [ktpp@kmtn.ru](mailto:ktpp@kmtn.ru)

1.3	Бинт марлевый медицинский нестерильный	ГОСТ 1172-93	5 м x 10 см	1 шт.	<p>Бинт марлевый медицинский нестерильный ГОСТ 1172-93, согласно маркировке, размером 5 м x 10 см. Производитель: ООО ТД «АППОЛО», г.Москва. Рег. удостоверение №ФСР 2007/00081 от 10.05.2007.</p> <p>Согласно ГОСТ 1172-93, размер бинта должен составлять: длина 5,0±0,2 м, ширина 10,0±0,5 см</p> <p>Фактически размер бинта составил: 4,81 м x 9,5 см</p> <p>Соответствует требованиям ГОСТ по линейным размерам: отклонения в пределах нормы.</p> 
1.4	Бинт марлевый медицинский нестерильный	ГОСТ 1172-93	7 м x 14 см	1 шт.	<p>Бинт марлевый медицинский нестерильный ГОСТ 1172-93, согласно маркировке, размером 7 м x 14 см. Производитель: ООО ТД «АППОЛО», г.Москва. Рег. удостоверение №ФСР 2007/00081 от 10.05.2007.</p> <p>Согласно ГОСТ 1172-93, размер бинта должен составлять: длина 7,0±0,3 м, ширина 14,0±0,5 см</p> <p>Фактический размер бинта составил:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 6,92 м x 14 см</li></ul> <p>Соответствует требованиям ГОСТ по линейным размерам: отклонения в пределах нормы.</p> 





# СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО

CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

[www.tppko.ru](http://www.tppko.ru), e-mail: [ktpp@kmtu.ru](mailto:ktpp@kmtu.ru)

1.5	Бинт марлевый медицинский стерильный	ГОСТ 1172-93	5 м x 7 см	1 шт.	<p>Бинт марлевый медицинский стерильный ГОСТ 1172-93, согласно маркировке, размером 5 м x 7 см. Производитель: ООО ТД «АППОЛО», г.Москва. Рег. удостоверение №ФСР 2007/00081 от 10.05.2007.</p> <p>Согласно ГОСТ 1172-93, размер бинтов должен составлять: длина 5,0±0,2 м, ширина 7,0±0,5см</p> <p>Фактический размер бинта составил:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4,92 м. x 6,5 см</li> </ul> <p>Соответствует требованиям ГОСТ по линейным размерам: отклонения в пределах нормы</p> 
1.6	Бинт марлевый медицинский стерильный	ГОСТ 1172-93	5 м x 10 см	2 шт.	<p>Бинт марлевый медицинский стерильный ГОСТ 1172-93, согласно маркировке, размером 5 м x 10 см. Производитель: ООО ТД «АППОЛО», г.Москва. Рег. удостоверение №ФСР 2007/00081 от 10.05.2007.</p> <p>Согласно ГОСТ 1172-93, размер бинтов должен составлять: длина 5,0±0,2 м, ширина 10,0±0,5см</p> <p>Фактический размер бинтов составил:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6,67 м x 9,5 см</li> <li>• 6,80 м x 9,5 см</li> </ul> <p>Фактический размер не соответствует маркировке и требованиям ГОСТ</p> 







# СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО

CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

[www.tppko.ru](http://www.tppko.ru), e-mail: [ktp@kmtn.ru](mailto:ktp@kmtn.ru)

1.7	Бинт марлевый медицинский стерильный	ГОСТ 1172-93	7 м x 14 см	2 шт.	<p>Бинт марлевый медицинский стерильный ГОСТ 1172-93, согласно маркировке, размером 7 м x 14 см. Производитель: ООО ТД «АППОЛО», г.Москва. Рег. удостоверение №ФСР 2007/00081 от 10.05.2007.</p> <p>Согласно ГОСТ 1172-93, размер бинтов должен составлять: длина 7,0±0,3 м, ширина 14,0±1,0 см</p> <p>Фактический размер бинтов составил: •6,94 м x 14 см 6,94 м x 14 см</p> <p><b>Соответствует требованиям ГОСТ по линейным размерам: отклонения в пределах нормы</b></p> 
1.8	Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой	ГОСТ 1179-93 <3>		1 шт.	<p>Пакет перевязочный медицинский первой помощи с одной подушечкой стерильный ГОСТ 1179-93. Производитель: ООО ТД «АППОЛО», г.Москва. Рег. удостоверение №ФСР 2010/07563 от 04.05.2010.</p> <p>Согласно ГОСТ 1179-93, размер подушечки пакета должен быть: 13,0±1,0 x 11,0±1,0см; размер бинта 5,0±0,2 м x 10+/-0,5 см. Фактический размер составил:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• подушечки – 12 см x 10 см;</li> <li>• бинта – 5 м x 9,5 см</li> </ul> <p><b>Соответствует требованиям ГОСТ по линейным размерам для пакета перевязочного медицинского первой помощи с одной подушечкой: отклонения в пределах нормы</b></p> <p><b>Не соответствует требованиям Приказа, согласно которого в комплектации должен быть пакет перевязочный ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ (с размерами согласно ГОСТ: подушечка 32,0±1,5 см x 17,5±1,0 см; бинт 7,0±0,3 см x 10,0±0,5 см).</b></p> 







# СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО  
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24  
Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

[www.tppko.ru](http://www.tppko.ru), e-mail: [tppp@kmtn.ru](mailto:tppp@kmtn.ru)

1.9	Салфетки марлевые медицинские стерильные	ГОСТ 16427-93 <4>	Не менее 16 x 14 см N 10	1 уп.	<p>Салфетки марлевые медицинские стерильные, согласно маркировке – размер 16 x 14 см, ГОСТ 16427-93. Изготовитель ООО ТД «АППОЛО», г. Москва. Рег. удостоверение №ФСР 2009/05213 от 24.09.2009</p> <p>Согласно ГОСТ 16427-93, размер салфеток должен составлять: длина 16±1,0 см, ширина 14±1,0 см</p> <p>Фактический размер салфеток составил: 16x 13,5 см</p> <p><b>Соответствует требованиям ГОСТ по линейным размерам: отклонения в пределах нормы</b></p> 
1.10	Лейкопластырь бактерицидный	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 4 см x 10 см	2 шт.	<p>Лейкопластырь бактерицидный, согласно маркировке, размер 4 см x 10 см.</p> <p><b>ГОСТ отсутствует.</b> Производитель: ФармЛайн Лимитед, Великобритания.</p> <p>Рег. удостоверение №ФСЗ 2008/01958 от 23.06.2008</p> <p>Фактический размер соответствует заявленному</p> 







# СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО



CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

[www.tppko.ru](http://www.tppko.ru), e-mail: [ktpp@kmtn.ru](mailto:ktpp@kmtn.ru)

1.11	Лейкопластырь бактерицидный	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 1,9 см x 7,2 см	10 шт.	<p>Лейкопластырь бактерицидный, согласно маркировке, размер 1,9 см x 7,2 см. ГОСТ отсутствует. Производитель: ФармЛайн Лимитед, Великобритания. Рег. удостоверение №ФСЗ 2008/01958 от 23.06.2008</p> <p>Фактический размер соответствует заявленному.</p> 
1.12	Лейкопластырь рулонный	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 1 см x 250 см	1 шт.	<p>Лейкопластырь рулонный, согласно маркировке, размер 1 см x 250 см ГОСТ не указан. Производитель: Великобритания.</p> <p>Фактический размер соответствует заявленному</p> 
2	Средства для сердечно-легочной реанимации				







# СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»




Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО  
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

[www.tppko.ru](http://www.tppko.ru), e-mail: [ktp@kmtn.ru](mailto:ktp@kmtn.ru)

2.1	Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" или карманная маска для искусственной вентиляции легких «Рот-маска»	ГОСТ Р ИСО 10993-99		1 шт.	<p>Устройство для проведения искусственного дыхания «РОТ-УТРОЙСТВО-РОТ» одноразовое пленочное, изготовитель: ООО ТД «АППОЛО», Россия. Рег. удостоверение №ФСР 2008/03530 от 22.10.2008 г. ТУ 9398-016-42965160-2004</p> 
3	Прочие средства				
3.1	Ножницы для разрезания повязок по Листеру	ГОСТ Р 21239-93 (ИСО 7741-86) <5>		1 шт.	<p>Ножницы без упаковки и маркировки</p> 
3.2	Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 12.5 x 11.0 см	5 шт.	<p>Салфетка антисептическая из нетканого материала 130x 180 мм 5 шт. ТУ 9393-054-42965160-2012 Производитель: ООО ТД «Апполо», г. Москва, Россия. Рег. удостоверение №РЗН 2013/487 от 11.04.2013 г. Комплектация аптечки салфетками данного изготовителя не предусмотрена Рег. удостоверением.</p> 







# СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО

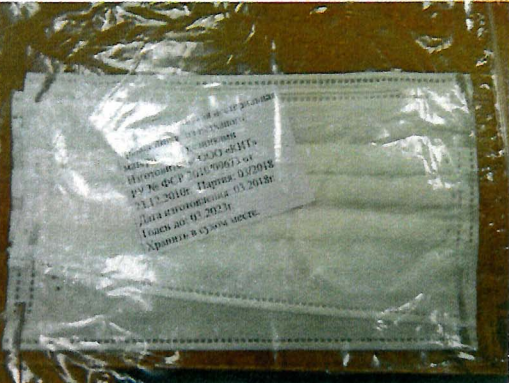
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

[www.tppko.ru](http://www.tppko.ru), e-mail: [ktp@kmtn.ru](mailto:ktp@kmtn.ru)

3.3	Перчатки медицинские нестерильные, смотровые	ГОСТ Р ИСО 10993-99 ГОСТ Р 52238-2004 <6> ГОСТ Р 52239-2004 <7> ГОСТ 3-88 <8>	Размер не менее М	2 пары	<p>Перчатки медицинские нестерильные, размер L, ГОСТ не указан, рег. удостоверение № ФСЗ 2012/12488 от 14.02.2018 г. Производитель: ТГ Медикал СДН Бхд, Малайзия.</p> 
3.4.	Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала с резинками или с завязками	ГОСТ Р ИСО 10993-99		2 шт.	<p>Маска медицинская нестерильная – 2 шт. Изготовитель: ООО «Кит» (адрес отсутствует), ГОСТ не указан. РУ № ФСР 2010/09673 от 23.12.2010 г. <b>Комплектация аптечки продукцией данного изготовителя не предусмотрена Рег. удостоверением.</b></p> 







# СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО


CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

[www.tppko.ru](http://www.tppko.ru), e-mail: [ktp@kmtn.ru](mailto:ktp@kmtn.ru)

3.5.	Покрывало спасательное изотермическое	ГОСТ Р ИСО 10993-99, ГОСТ Р 50444-92	Не менее 160x210	1 шт.	<p>Покрывало спасательное 160 см x 210 см, производитель Имекор ГМБХ энд КО, Германия. Рег. удостоверение № РЗН 2013/891 от 25.09.2013 г. ГОСТ Р 50444-92</p> <p>Фактический размер соответствует заявленному.</p> 
4. Прочие средства					







# СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

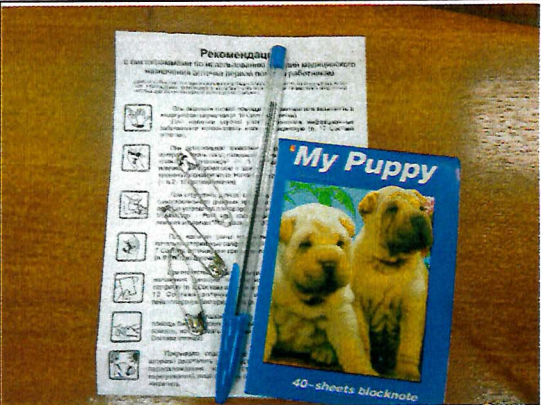

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО  
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331. ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

[www.tppko.ru](http://www.tppko.ru), e-mail: [ktp@kmtn.ru](mailto:ktp@kmtn.ru)

4.1.	Английские булавки стальные со спиралью	ГОСТ 9389-75 <9>	Не менее 38 мм	3 шт.	
4.2.	Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи работникам			1 шт.	
4.3.	Футляр или сумка санитарная			1 шт.	
4.4.	Блокнот отрывной для записей	ГОСТ 18510-87	Формат не менее А7	1 шт.	
4.5.	Авторучка	ГОСТ 28937-91 <11>		1 шт.	

8.2. В результате исследования установлено: состав аптечки для оказания первой помощи работникам не соответствует указаниям Приказа Минздравсоцразвития России от 05 марта 2011 г. №169н «Об утверждении требований и комплектации изделий медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам» по следующим показателям:

п. 1.6 таблицы: **несоответствие по фактическим размерам изделий;**

п. 1.8 - не соответствует требованиям Приказа: аптечка должна быть укомплектована пакетом перевязочным ИНДИВИДУАЛЬНЫМ.

п. п. 1.10, 1.11, 1.12, 3.3, 3.4 – на маркировке отсутствует информация о НТД, в указаниях приказа - ГОСТ Р ИСО 10993-99;

п. 3.1 – **отсутствует маркировка;** установить изготовителя не представляется возможным, следовательно, изделие не может быть использовано при комплектации аптечки.

п. п. 3.2, 3.4 – данная продукция указанных производителей не включена в регистрационное удостоверение на аптечку № ФСР 2011/11271 от 19.03.2012 г., следовательно, не может быть использована при комплектации аптечки.

Оценка качества изделий по показателям, требующим лабораторных испытаний, не проводилась.







# СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО

CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

[www.tppko.ru](http://www.tppko.ru), e-mail: [tppp@kmtm.ru](mailto:tppp@kmtm.ru)

## 9. Заключение.

9.1. Состав аптечки для оказания первой помощи работникам **не соответствует** указаниям Приказа Минздравсоцразвития России от 05 марта 2011 г. №169н «Об утверждении требований и комплектации изделий медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам».

9.2. Часть медицинских изделий, которыми укомплектована аптечка, не соответствуют параметрам, заявленным производителями и отвечающим требованиям Приказа Минздравсоцразвития России от 05 марта 2011 г. №169н «Об утверждении требований и комплектации изделий медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам», а именно:

п.1.6 таблицы: **несоответствие по фактическим размерам изделий;**

п. 1.8 - **не соответствует требованиям Приказа:** аптечка должна быть укомплектована пакетом перевязочным ИНДИВИДУАЛЬНЫМ.

п. п. 1.10, 1.11, 1.12, 3.3, 3.4 – **на маркировке отсутствует информация о НТД**, в указаниях приказа - ГОСТ Р ИСО 10993-99;

п. 3.1 – отсутствует маркировка; установить изготовителя не представляется возможным, следовательно, **изделие не может быть использовано при комплектации аптечки.**

п. п. 3.2, 3.4 – данная продукция указанных производителей не включена в регистрационное удостоверение на аптечку № ФСР 2011/11271 от 19.03.2012 г., следовательно, **не может быть использована при комплектации аптечки.**

**Оценка качества изделий по показателям, требующим лабораторных испытаний, не проводилась.**

9.3. Производители, указанные на упаковке изделий (п.п. 3.2, 3.4 таблицы) не соответствуют заявленным в регистрационном удостоверении на аптечку. Производитель продукции, указанной в п. 3.1 таблицы, неизвестен.

### Примечание:

- Примечание:
- От эксперта не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по поводу произведенной экспертизы не иначе как по отдельному договору.
- При проведении экспертизы эксперт руководствовался следующими документами:
- СТО ТПП 20-03-10 «Порядок проведения экспертизы экспертными организациями/подразделениями Торгово-промышленных палат в Российской Федерации»;
- Приказ Минздравсоцразвития России от 05 марта 2011 г. №169н «Об утверждении требований и комплектации изделий медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам»
- Федеральный закон №323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- ГОСТ Р ИСО 10993-99 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования;
- ГОСТ 1172-93 Бинты марлевые медицинские. Технические условия;
- ГОСТ 1179-93 Пакеты перевязочные медицинские. Технические условия;
- ГОСТ 16427-93 Салфетки и отрезки марлевые медицинские. Технические условия;
- ГОСТ Р 52239-2004. Перчатки медицинские диагностические одноразовые. Часть 1. Спецификация на перчатки из каучукового латекса или раствора (с Изменением N 1);
- ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-86) Инструменты хирургические. Ножницы. Общие требования и методы испытаний;
- ГОСТ Р 50444-92 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия.

Измерения проводились поверенной металлической линейкой длиной 300 мм с ценой деления 1 мм (клеимо о поверке Костромского ЦСМ, сертификат о калибровке средства измерений № 1844/110 от 03.09.2018 г.), длиной 1000 мм с ценой деления 1 мм (клеимо о поверке Костромского ЦСМ,







# СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО  
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

[www.tppko.ru](http://www.tppko.ru), e-mail: [ktp@kmtn.ru](mailto:ktp@kmtn.ru)

сертификат о калибровке средства измерений № 1845/110 от 03.09.2018 г.) .

- Фотосъемка производилась цифровым фотоаппаратом «SONY» модель DSC-H90.
- Приведенные в Заключении эксперта распечатки фотографий не являются 100%-ным эталоном цвета товара, представленного на экспертизу.

Эксперт ТПП КО

  
Воронина А.С.

Заключение зарегистрировано на 13-ти страницах  
в ТПП Костромской области  
08.02.2019 года





Пронумеровано,  
прошнуровано и  
скреплено печатью

13 лист об

Вороженин  
Президент ТПП КО

Орлов В.В.

