



СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993
Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24
Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31
www.tppko.ru, e-mail: ktp@kmtn.ru

Экспертная организация: Союз «Торгово-промышленная палата Костромской области», действующая на основании закона о Торгово-промышленных палатах РФ № 5340-1 от 07.07.1993 г., гл. III, ст.12.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА №12905/00282

1. Дата составления: 09 апреля 2019 года.
2. Место составления: г. Кострома
3. Заключение составлено: экспертом Союза «Торгово - промышленная палата Костромской области» Ворониной А.С. Образование – высшее, специальность – товаровед-эксперт, сертификат компетентности эксперта №18129 от 20.10.2017 г., стаж работы экспертом – 15 лет.
4. Наряд №282 от 05.04.2019 г.
5. Основание для проведения экспертизы: заявка Костромской областной общественной организации поддержки производителей лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники от 05.04.2019 г.
6. На разрешение экспертизы поставлены вопросы:
 - 6.1. Соответствует ли состав аптечки указаниям Приказа Минздравмедпрома РФ от 20 августа 1996 г. №325 «Об утверждении состава и рекомендаций по применению аптечки первой помощи (автомобильной)» в редакции Приказа Минздравсоцразвития России от 08.09.2009 г. №697н (Приложение №1)?
 - 6.2. Соответствуют ли медицинские изделия (размер, форма, упаковка, вкладыш), которыми укомплектована аптечка, параметрам, заявленным производителями и отвечающим требованиям вышеуказанного приказа? Если нет, то по каким признакам?
7. Изготовитель: ООО «Производственное предприятие «АСТРА», 394026, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д. 1, Россия.
8. Экспертизой установлено:
 - 8.1. Предъявлена «Аптечка первой помощи автомобильная, согласно маркировке, изготовлена в соответствии с приказом Минздравмедпрома РФ №325 от 20.08.1996 г. в редакции приказа Минздравсоцразвития РФ №697Н от 08.09.2009 г.

Аптечка упакована в черный пластиковый футляр с одним замком белого цвета и в п/э пленку. На лицевой стороне футляра бумажная этикетка с маркировкой:

- надпись «Аптечка первой помощи автомобильная»
- изображение торгового знака «Производственное предприятие «АСТРА»;
- надпись «Аптечка изготовлена в соответствии с приказом Минздравмедпрома РФ №325 от 20.08.1996 г. в редакции приказа Минздравсоцразвития РФ №697Н от 08.09.2009 г.»

На тыльной стороне имеется бумажный вкладыш с маркировкой:

- состав аптечки первой помощи (автомобильной) «АСТРАЛЮКС»
- перечень НТД: ТУ 9398-002-63855889-2010, РУ № ФСР 2010/07154 от 18.08.2011 г.;
- адрес, телефон изготовителя (ООО «Производственное предприятие «АСТРА», 394026, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д. 1)
- срок годности, дата выпуска, штамп ОТК

Экспертом произведено вскрытие упаковки и осмотр составляющих компонентов аптечки.

Для ответа на поставленные вопросы экспертом произведено исследование содержимого представленной на экспертизу аптечки на соответствие требованиям, изложенным в приказе Минздравмедпрома РФ №325 от 20.08.1996 г., в редакции приказа Минздравсоцразвития РФ №697Н от 08.09.2009 г. (Приложение N 1 и на соответствие заявленным на маркировке параметрам.

Результаты исследования представлены в Таблице 1.





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО

CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: ktp@kmtn.ru

Таблица 1.

| СОСТАВ АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ (АВТОМОБИЛЬНОЙ) в соответствии с приказом Минздравмедпрома РФ №325 от 20.08.1996 г., в редакции приказа Минздравсоцразвития РФ №697Н от 08.09.2009 г. | | | | | Фактически обнаружено: |
|--|---|----------------------|-------------------------|-----------------------------|--|
| N п/п | Наименование вложения | Нормативный документ | Форма выпуска (размеры) | Количество (штук, упаковок) | |
| 1 | Средства для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран | | | | |
| 1.1 | Жгут кровоостанавливающий | ГОСТ Р ИСО 10993-99 | | 1 шт. | <p>Жгут кровоостанавливающий с дозированной компрессией ТУ 2545-008-26528997-10, производитель: ООО НПФ «Мирал», г. Воронеж, Россия. Рег. удостоверение № ФСР 2010/07432 от 25.08.2016 г.</p>  |
| 1.2 | Бинт марлевый медицинский нестерильный | ГОСТ 1172-93 <2> | 5 м x 5 см | 2 шт. | <p>Бинт марлевый медицинский нестерильный ГОСТ 1172-93, согласно маркировке, размером 5 м x 5 см. Производитель: ООО «Вега», г. Воронеж, Россия. Рег. удостоверение № ФСР 2011/10001 от 08.09.2016 г. Согласно ГОСТ 1172-93 п. 1.1.3, размер изделия должен соответствовать размерам: длина 5,0±0,2 м, ширина 5,0±0,5 см</p> <p>Фактически размер бинтов составил:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,59 м x 5 см • 2,63 м x 5 см <p>Не соответствует требованиям ГОСТ 1172-93</p>  |





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»



UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24
Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: ktpp@kmtn.ru

| | | | | | |
|-----|--|--------------|-------------|-------|---|
| 1.3 | Бинт марлевый медицинский нестерильный | ГОСТ 1172-93 | 5 м x 10 см | 2 шт. | <p>Бинт марлевый медицинский нестерильный, согласно маркировке, размер 5 м x 10 см ГОСТ 1172-93. Производитель: ООО «Вега», г. Воронеж, Россия. Рег. удостоверение № ФСР 2011/10001 от 08.09.2016 г. Согласно ГОСТ 1172-93 п. 1.1.3, размер изделия должен соответствовать размерам: длина 5,0±0,2 м, ширина 10,0±0,5 см Фактически размер бинтов составил:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,58 м x 10 см • 2,51 м x 10 см <p>Не соответствует требованиям ГОСТ 1172-93</p>  |
| 1.4 | Бинт марлевый медицинский нестерильный | ГОСТ 1172-93 | 7 м x 14 см | 1 шт. | <p>Бинт марлевый медицинский нестерильный, согласно маркировке, размер 7 м x 14 см, ГОСТ 1172-93. Производитель: ООО «Вега», г. Воронеж, Россия. Рег. удостоверение № ФСР 2011/10001 от 08.09.2016 г. Согласно ГОСТ 1172-93 п. 1.1.3, размер изделия должен соответствовать размерам: длина 7,0±0,3 м, ширина 14,0±0,5 см Фактический размер бинта составил:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,55 м x 14 см. <p>Не соответствует требованиям ГОСТ 1172-93</p>  |
| 1.5 | Бинт марлевый медицинский стерильный | ГОСТ 1172-93 | 5 м x 7 см | 2 шт. | <p>Бинт марлевый медицинский стерильный, согласно маркировке, размер 5 м x 7 см ГОСТ 1172-93. Производитель: ООО «Вега», г. Воронеж, Россия. Рег. удостоверение № ФСР 2011/10001 от 08.09.2016 г. Согласно ГОСТ 1172-93 п. 1.1.3, размер изделия должен соответствовать</p> |







СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»
Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993
Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24
Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31
www.tppko.ru, e-mail: ktp@kmin.ru

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--------------|-------------|-------|---|
| | | | | | <p>размерам: длина 5,0±0,2 м, ширина 7,0±0,5 м Фактический размер бинтов составил:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,60 м x 7 см; • 2,50 м x 7 см <p>Не соответствует требованиям ГОСТ 1172-93</p>  |
| 1.6 | Бинт марлевый медицинский стерильный | ГОСТ 1172-93 | 5 м x 10 см | 2 шт. | <p>Бинт марлевый медицинский стерильный, согласно маркировке, размер 5 м x 10 см, ГОСТ 1172-93. Производитель: ООО «Вега», г. Воронеж, Россия. Рег. удостоверение № ФСР 2011/10001 от 08.09.2016 г. Согласно ГОСТ 1172-93 п. 1.1.3, размер изделия должен соответствовать размерам: длина 5,0±0,2 м, ширина 10,0±0,5 см Фактический размер бинтов составил:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,70 м x 10 см • 2,60 м x 10 см <p>Не соответствует требованиям ГОСТ 1172-93</p>  |
| 1.7 | Бинт марлевый медицинский стерильный | ГОСТ 1172-93 | 7 м x 14 см | 1 шт. | <p>Бинт марлевый медицинский стерильный, согласно маркировке, размер 7 м x 14 см, ГОСТ 1172-93. ООО «Вега», г. Воронеж, Россия. Рег. удостоверение № ФСР 2011/10001 от 08.09.2016 г. Согласно ГОСТ 1172-93 п. 1.1.3, размер изделия должен соответствовать размерам: длина 7,0±0,3 м, ширина 14,0±1 см Фактический размер бинта составил:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 м x 14 см <p>Не соответствует требованиям ГОСТ 1172-93</p> |





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: ktp@kmtn.ru

| | | | | | |
|-----|--|---------------|--------------------------|-------|---|
| | | | | | |
| 1.8 | Пакет перевязочный стерильный | ГОСТ 1179-93 | | 1 шт. | <p>Пакет перевязочный медицинский первой помощи с одной подушечкой стерильный ГОСТ 1179-93. Производитель: ООО «Вега», г. Воронеж, Россия. Рег. удостоверение №ФСР 2011/10002 от 08.09.2016 г.</p> <p>Согласно ГОСТ 1179-93, размер подушечки должен быть: 13+/-1 см x 11+/-1 см; размер бинта 5+/-0,2 м x 10+/-0,5 см.</p> <p>Фактический размер составил:</p> <ul style="list-style-type: none"> • подушечки – 10x10 см; • бинта – 2,60 м x 10,2 см <p>Не соответствует требованиям ГОСТ 1179-93</p> |
| 1.9 | Салфетки марлевые медицинские стерильные | ГОСТ 16427-93 | Не менее 16 x 14 см N 10 | 1 уп. | <p>Салфетки марлевые медицинские двухслойные стерильные, согласно маркировке – размер 16 x 14 см, ГОСТ 16427-93. Изготовитель ООО ПКФ «АХТАМАР», г. Иваново, Россия. Рег. удостоверение №ФСР 2011/12069 от 26.05.2017</p> <p>Согласно ГОСТ 16427-93, размер салфеток должен составлять: длина 16±1,0 см, ширина 14±1,0 см</p> <p>Фактический размер салфеток составил: 16 x 14 см</p> <p>Соответствует требованиям ГОСТ</p> |





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24
Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: ktpm@kmtm.ru

| | | | | | |
|------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|--------|---|
| | | | | |  |
| 1.10 | Лейкопластырь бактерицидный | ГОСТ Р ИСО 10993-99 | Не менее 4 см x 10 см | 2 шт. | <p>Лейкопластырь бактерицидный, согласно маркировке, размер 4 см x 10 см, ГОСТ не указан. Рег. удостоверение № ФСЗ 2009/03549 от 12.03.2015 г. Производитель: «Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд», КНР Фактический размер соответствует заявленному.</p>  |
| 1.11 | Лейкопластырь бактерицидный | ГОСТ Р ИСО 10993-99 | Не менее 1,9 см x 7,2 см | 10 шт. | <p>Лейкопластырь бактерицидный, согласно маркировке, размер 1,9 см x 7,2 см, ГОСТ не указан. Рег. удостоверение № ФСЗ 2009/03549 от 12.03.2015 г. Производитель: «Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд», КНР Фактический размер соответствует заявленному.</p> |





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993
Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24
Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31
www.tppko.ru, e-mail: kipp@kmtn.ru

| | | | | | |
|------|---|---------------------|------------------------|-------|---|
| | | | | | |
| 1.12 | Лейкопластырь ролонный | ГОСТ Р ИСО 10993-99 | Не менее 1 см х 250 см | 1 шт. | <p>Лейкопластырь рулонный, согласно маркировке, размер 1 см х 250 см ГОСТ не указан. Рег. удостоверение №ФСЗ 2008/02807 от 20.10.2008 г. Производитель: Чангжоу ХуалианьХэлс Дрессинг Ко., Лтд, КНР Фактический размер соответствует заявленному.</p> |
| 2 | Средства для сердечно-легочной реанимации | | | | |
| 2.1 | Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" | ГОСТ Р ИСО 10993-99 | | 1 шт. | <p>Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" ТУ 9444-009-26528997-10. Производитель: ООО НПФ «МИРАЛ», г. Воронеж, Россия. Рег. удостоверение №ФСР 2010/07434 от 25.08.2016 г.</p> |





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»




UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24
Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: kipp@kmtm.ru

| | | | | | |
|-----|----------------------|--|-------------------|--------|---|
| | | | | |  |
| 3 | Прочие средства | | | | |
| 3.1 | Ножницы | ГОСТ Р 51268-99 | | 1 шт. | Ножницы тупоконечные, ГОСТ не указан. Производитель: «Lin Li Home Products Manufactory Corp» (Китай)  |
| 3.2 | Перчатки медицинские | ГОСТ Р ИСО 10993-99 ГОСТ Р 52238-2004 ГОСТ Р 52239-2004 ГОСТ 3-88 | Размер не менее М | 1 пара | Перчатки латексные смотровые диагностические медицинские нестерильные размер М, согласно маркировке на бумажном вкладыше: производитель «SFM Hospital Products GmbH», Германия, ГОСТ Р ИСО 10993-2009, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ Р 52239-2004, ГОСТ 3-88 Рег. удостоверение №ФСЗ 2010/07368 от 05.07.2010 г. Произведены линейные замеры перчаток, изделие соответствует заявленному на маркировке (М).  |





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»



UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24
Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: ktpp@kmtin.ru
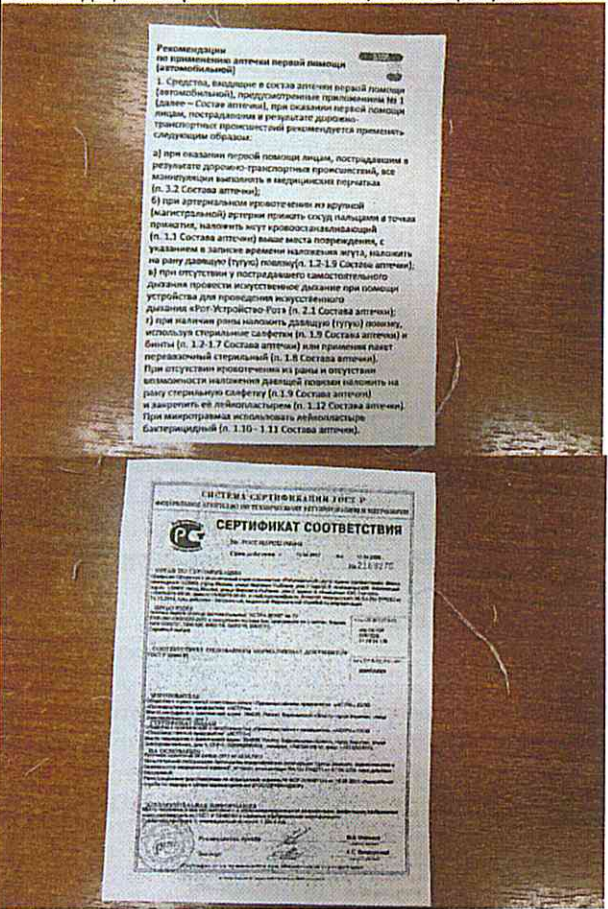
| | | | | | |
|-----|--|--|--|-------|--|
| 3.3 | Рекомендации по применению аптечки первой помощи (автомобильной) | | | 1 шт. | <p>Рекомендации по применению аптечки первой помощи (автомобильной)</p> <p>1. Средства, входящие в состав аптечки первой помощи (автомобильной), предусмотренные приложением №1 (далее – Состав аптечки), при оказании первой помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий рекомендуются применять следующие образом:</p> <p>а) при оказании первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, все манипуляции выполнять в санитарных перчатках (п. 3.2 Состав аптечки);</p> <p>б) при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии прижать сосуд пальцами в точках прижатия, наложить жгут кровоостанавливающий (п. 3.1 Состав аптечки) выше места повреждения, с указанием в записке времени наложения жгута, наложить на рану давящую (тугую) повязку (п. 1.2-1.9 Состав аптечки);</p> <p>в) при отсутствии у пострадавшего самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание при помощи устройства для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» (п. 2.1 Состав аптечки);</p> <p>г) при наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, использовать стерильные салфетки (п. 3.5 Состав аптечки) и бинты (п. 2.2-2.7 Состав аптечки) или применить пакет перевязочный стерильный (п. 1.8 Состав аптечки). При отсутствии кровооттока из раны и отсутствии возможности наложения давящей повязки наложить на рану стерильную салфетку (п. 3.5 Состав аптечки) и закрепить ее лейкопластырем (п. 3.12 Состав аптечки). При ампутации использовать лейкопластырь бактерицидный (п. 1.10-1.11 Состав аптечки).</p>  |
| 3.4 | Футляр | | | 1 шт. |  |





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»


UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24
Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: kipp@kmtm.ru

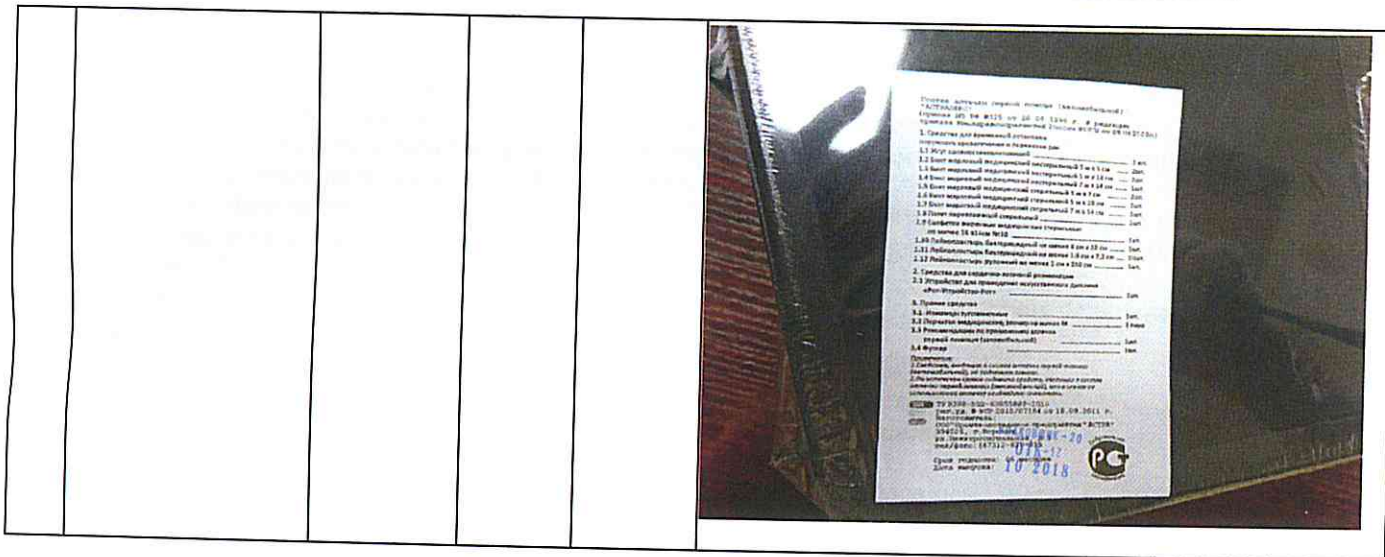

8.2. В результате исследования установлено: состав Аптечки первой помощи автомобильной соответствует указаниям Приказа Минздравмедпрома РФ от 20 августа 1996 г. №325 «Об утверждении состава и рекомендаций по применению аптечки первой помощи (автомобильной)» в редакции Приказа Минздравсоцразвития России от 08.09.2009 г. №697н) (по составу вложений).

8.3. Часть медицинских изделий, которыми укомплектована аптечка, не соответствуют параметрам, заявленным производителями и отвечающим указаниям Приказа Минздравмедпрома РФ от 20 августа 1996 г. №325 «Об утверждении состава и рекомендаций по применению аптечки первой помощи (автомобильной)» в редакции Приказа Минздравсоцразвития России от 08.09.2009 г. №697н) по следующим показателям:

- п.п. 1.2-1.8 вкл. таблицы: несоответствие маркировке и требованиям Приказа по фактическим размерам изделий;
- п.п. 1.10, 1.11, 1.12, 3.1 – на маркировке отсутствует информация о НТД

Оценка качества изделий по показателям, требующим лабораторных испытаний, не проводилась.

9. Заключение.

9.1. Состав Аптечки первой помощи автомобильной соответствует указаниям Приказа Минздравмедпрома РФ от 20 августа 1996 г. №325 «Об утверждении состава и рекомендаций по применению аптечки первой помощи (автомобильной)» в редакции Приказа Минздравсоцразвития России от 08.09.2009 г. №697н) (по составу вложений).

9.2. Часть медицинских изделий, которыми укомплектована аптечка, не соответствуют параметрам, заявленным производителями и отвечающим указаниям Приказа Минздравмедпрома РФ от 20 августа 1996 г. №325 «Об утверждении состава и рекомендаций по применению аптечки первой помощи (автомобильной)» в редакции Приказа Минздравсоцразвития России от 08.09.2009 г. №697н) по следующим показателям:

- п.п. 1.2-1.8 вкл. таблицы: несоответствие маркировке и требованиям Приказа по фактическим размерам изделий;
- п.п. 1.10, 1.11, 1.12, 3.1 – на маркировке отсутствует информация о НТД





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО

CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31


www.tppko.ru, e-mail: ktp@kmtn.ru

Примечание:

- От эксперта не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по поводу произведённой экспертизы не иначе как по отдельному договору.
- При проведении экспертизы эксперт руководствовался следующими документами:
 - СТО ТПП 20-03-10 «Порядок проведения экспертизы экспертными организациями/подразделениями Торгово-промышленных палат в Российской Федерации»;
 - Приказ Минздравмедпрома РФ от 20 августа 1996 г. №325 «Об утверждении состава и рекомендаций по применению аптечки первой помощи (автомобильной)» в редакции Приказа Минздравсоцразвития России от 08.09.2009 г. №697н);
 - ГОСТ Р ИСО 10993-99 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования;
 - ГОСТ 1172-93 Бинты марлевые медицинские. Технические условия;
 - ГОСТ 1179-93 Пакеты перевязочные медицинские. Технические условия;
 - ГОСТ 16427-93 Салфетки и отрезки марлевые медицинские. Технические условия;
 - ГОСТ Р 51268-99 Ножницы. Общие технические условия;
 - ГОСТ Р 52239-2004. Перчатки медицинские диагностические одноразовые. Часть 1. Спецификация на перчатки из каучукового латекса или раствора (с Изменением N 1);
- Измерения проводились поверенной металлической линейкой длиной 300 мм с ценой деления 1 мм (клеймо о поверке Костромского ЦСМ, сертификат о калибровке средства измерений № 1844/110 от 03.09.2018 г.), длиной 1000 мм с ценой деления 1 мм (клеймо о поверке Костромского ЦСМ, сертификат о калибровке средства измерений № 1845/110 от 03.09.2018 г.).
- Фотосъемка производилась цифровым фотоаппаратом «SONY» модель DSC-H90.
- Приведенные в Заключении эксперта распечатки фотографий не являются 100%-ным эталоном цвета товара, представленного на экспертизу.

Эксперт ТПП КО

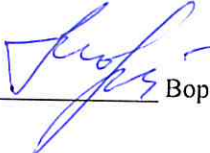


Воронина А.С.

Заключение зарегистрировано на 11-ти страницах
в ТПП Костромской области 09.04.2019 года



Пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печати

лист 06

В. Орлов
Президент ТПП К
Орлов В.

